



Personenwaage KERN MPC

Kompakte Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



KERN MPC 250K100M



Spezielles Adipositasmodell
KERN MPC 300K-1LM

Personenwaage KERN MPC



Merkmale

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- KERN MPC 300K-1LM: Version mit [Max] = 300 kg und größerer Wägeplatte. Besonders geeignet zum Wiegen von übergewichtigen Patienten im Adipositasbereich
- **1** KERN MPC 300K-1LM: Stabiler Haltegriff zum Transport der Waage
- **2** Auswertegerät vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt. Wandhalterung zur Montage des Auswertegerätes serienmäßig
- **3** Große Trittpläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“.

So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen

- Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können
- GLP/ISO-Protokoll, Ausdruck von Wägewert, BMI etc. mit Datum und Uhrzeit. FLP-/GMP-konformes Druckformular in den Sprachen DE, EN, FR, nur in Verbindung mit Schnittstellenkabel RS-232 KERN CFS-A01 + MPC-A01 und Drucker KERN YKB-01N
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 200×130×60 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 1,8 m
- Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
- Externer Netzadapter serienmäßig


Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN MBC-A06S05
- Reinigungstücher, alkoholfreie Tücher zur Wischdesinfektion, schnell wirksam, auf Basis von modernen quartären Ammoniumverbindungen, auch gegen Papova-Viren. Besonders materialschonend, dadurch gut geeignet zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Produkten. Erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540. Packungsinhalt 100 St., Größe 20×22 cm je Tuch, KERN MYC-01
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN MBC-A08
- Netzadapter extern, 100 V – 240 V, Standard EU, CH, UK, KERN YKA-43
- Netzadapter extern, 100 V – 240 V, Standard EU, KERN YKA-44
- Datenschnittstelle RS-232, nicht nachrüstbar, KERN MPC-A01
- Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts, KERN CFS-A01


STANDARD



OPTION

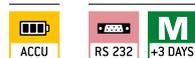

FACTORY

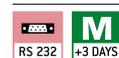

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Wägeplatte	Nettogewicht ca.	Gesetzlich vorgeschrieben Eichung
	[Max] kg	[d] kg	[e] kg	mm	kg	M KERN
MPC 250K100M	250	0,1	0,1	365×370×80	9	965-129
MPC 300K-1LM	300	0,1	0,1	400×500×120	10	965-129

*In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsart und PLZ

- 
Justierprogramm CAL:
 Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig
- 
Speicher:
 Waageninterne Speicherplätze, z. B. für Taragewichte, Wägedaten, Artikeldaten, PLU usw.
- 
Datenschnittstelle RS-232:
 Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder Netzwerk
- 
Datenschnittstelle RS-485:
 Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte. Geeignet für die Datenübertragung über größere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie möglich
- 
Datenschnittstelle Bluetooth*:
 Zur Datenübertragung von Waage zu Drucker, PC oder anderen Peripheriegeräten
- 
Datenschnittstelle WLAN:
 Zur Datenübertragung von Waage zu Drucker, PC oder anderen Peripheriegeräten
- 
Steuerausgang (Optokoppler, Digital I/O):
 Zum Anschluss von Relais, Signallampen, Ventilen etc.
- 
Statistik:
 Das Gerät berechnet aus den gespeicherten Messwerten statistische Daten, wie Durchschnittswert, Standardabweichung etc.
- 
PC Software:
 Zur Übertragung der Messdaten vom Gerät an einen PC
- 
GLP/ISO-Protokoll:
 Mit Datum und Uhrzeit. Nur mit KERN-Druckern
- 
KERN Communication Protocol (KCP):
 Ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man so ganz einfach in Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme integrieren
- 
Stückzählen:
 Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigensummschaltung von Stück auf Gewicht
- 
Summier-Level A:
 Die Gewichtswerte gleichartiger Wägegüter können aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden.
- 
Wägeeinheiten:
 umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten. Weitere Details siehe Internet.
- 
Wiegen mit Toleranzbereich:
 (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren. Der Vorgang wird durch ein akustisches oder optisches Signal unterstützt, siehe jeweiliges Modell
- 
ZERO:
 Rücksetzen der Anzeige auf 0
- 
Hold-Funktion:
 Bei unruhig stehenden, sitzenden oder liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt
- 
Hold-Funktion:
 Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- 
Staub- und Spritzwasserschutz IPxx:
 Die Schutzklasse ist im Piktogramm angegeben vgl. DIN EN 60529:2000-09, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
- 
Unterflurwägung:
 Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite
- 
Batterie-Betrieb:
 Für Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben
- 
Akku-Betrieb:
 Wiederaufladbares Set
- 
Batterie-Betrieb wiederaufladbar:
 Für einen wiederaufladbaren Batterie-Betrieb vorbereitet
- 
Universal-Steckernetzteil:
 Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für
 A) EU, CH
 B) EU, CH, GB, USA
- 
Steckernetzteil:
 230V/50Hz. Serienmäßig Standard EU. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA lieferbar
- 
Integriertes Netzteil:
 In der Waage integriert. 230V/50Hz in EU. Weitere Standards, wie z. B. GB, USA, AUS auf Anfrage
- 
Wägeprinzip: Dehnungsmessstreifen
 Elektrischer Widerstand auf einem elastischen Verformungskörper
- 
Peak-Hold-Funktion:
 Erfassung des Spitzenwertes innerhalb eines Messprozesses
- 
Push und Pull:
 Das Messgerät kann Zug- und Druckkräfte erfassen
- 
Längenmessung:
 Im Okular eingearbeitete Skala
- 
360° rotierbarer Mikroskopkopf
- 
Monokulares Mikroskop:
 Für den Einblick mit einem Auge
- 
Binokulares Mikroskop:
 Für den Einblick mit beiden Augen
- 
Trinokulares Mikroskop:
 Für den Einblick mit beiden Augen und zusätzlicher Option auf den Anschluss einer Kamera
- 
Abbe-Kondensor:
 Mit hoher numerischer Apertur, zur Lichtbündelung und -fokussierung
- 
Halogen-Beleuchtung:
 Für ein besonders helles und kontrastreiches Bild
- 
LED-Beleuchtung:
 Kalte, stromsparende und besonders langlebige Leuchtquelle
- 
Fluoreszenzbeleuchtung für Auflichtmikroskope:
 Mit 100 W Hochdruckdampfampe und Filter
- 
Fluoreszenzbeleuchtung für Auflichtmikroskope:
 Mit 3 W LED-Beleuchtung und Filter
- 
Phasenkontrasteinheit:
 Für stärkere Kontraste
- 
Dunkelfeldkondensator/Einheit:
 Kontrastverstärkung durch indirekte Beleuchtung
- 
Polarisationseinheit:
 Zur Polarisierung des Lichtes
- 
Infinity-System:
 Unendlich korrigiertes optisches System
- 
Automatische Temperaturkompensation:
 Für Messungen zwischen 10 °C und 30 °C
- 
Eichung:
 Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben
- 
Paketversand per Kurierdienst:
 Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben
- 
Palettenversand per Spedition:
 Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben

* Der Name *Bluetooth®* und die Logos sind eingetragene Warenzeichen und gehören der Bluetooth SIG, Inc.. Jedwede Verwendung dieser Warenzeichen durch die KERN & SOHN GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen oder Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.