

seca 216

Mechanischer Messstab für Kinder und Erwachsene



- Flexibel wählbarer Messbereich.
- Einfaches Ablesen.
- Feststellbarer Kopfanschlag.
- Zwei Maßeinheiten wählbar.
- Leichte Montage.

seca 216:**Flexibel im Gebrauch, präzise im Ergebnis.**

Medizinische Instrumente müssen jederzeit den Praxistest bestehen – natürlich vor allem in Bezug auf exakte Ergebnisse, auf die sich Ärzte und Pflegepersonal verlassen können. Aber auch flexible Einsatzmöglichkeiten, einfache Handhabung und leichtes Ablesen bestimmen den Wert eines Gerätes im Alltag. Der Messstab seca 216 besteht alle Anforderungen mit Bravour. Ob im Krankenhaus oder in Arztpraxen – überall, wo eine intelligente Kombination aus Genauigkeit und leichter Bedienung gefragt ist, leistet der Messstab optimale Dienste.

**Flexibel wählbarer Messbereich.**

Ob groß, ob klein – der seca 216 ist für das Messen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geeignet. Denn: Der Messstab verfügt über eine austauschbare Skala von 3,5 bis 230 Zentimetern. Die Skala kann flexibel in ein 138 Zentimeter langes Kunststoffprofil eingeschoben werden. Welcher Messbereich im Profil erscheint, entscheidet der Anwender.



Ob für Kinder oder Erwachsene, der benötigte Messbereich kann individuell dem Bedarf angepasst werden.

Einfaches Ablesen.

Bereits während der Messung lässt sich das Ergebnis ganz einfach ablesen, denn die Skala verläuft seitlich versetzt zum Messstab. Ein großes, gut einsehbares Anzeigefenster unterstützt die Genauigkeit des Ablesens. Doch auch nach dem Messen bleibt das Ergebnis konstant: Der Kopfanschlag lässt sich mit einem Handgriff arretieren und verbleibt exakt in seiner Position, wenn die gemessene Person ihren Platz am Messstab verlässt.



Mit der Feststellschraube wird das Ergebnis fixiert.

International einsetzbar.

Auch in Bezug auf die Maßeinheit zeigt der seca 216 sich flexibel: Die beidseitig bedruckte Skala lässt freie Wahl. Sie kann das Ergebnis je nach Bedarf in Zentimetern oder in Zentimetern und in Inch anzeigen.

Leichte Montage.

Der seca 216 kann in frei wählbarer Höhe an der Wand angebracht werden. Die Skala selbst dient dabei als Montagehilfe: Wird der Nullpunkt der Skala auf den Boden aufgesetzt und die Skala straff am Messstab fixiert, lässt sich die gewünschte Montagehöhe ganz einfach bestimmen. Und die gemessenen Werte sind garantiert millimetergenau.

seca 216**Technische Daten**

- Messbereich: 138 cm variabel von 3,5 – 230 cm
- Teilung: 1 mm
- Maße (BxHxT): 120 x 1.500 x 217 mm
- Eigengewicht: 1,7 kg







seca 799

Elektronische Säulenwaage mit BMI-Funktion



- Standortunabhängig durch Batteriebetrieb.
- Einfach zu transportieren.
- Rentabel und wartungsarm durch sparsamen Verbrauch.
- Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz.

seca 799:**Die intelligente Lösung für flexiblen Einsatz**

Im medizinischen Bereich eine Notwendigkeit: hohe Präzision und durchdachte Funktionalität müssen mit Wirtschaftlichkeit verbunden sein. Seit über hundert Jahren entwickelt seca innovative Waagen und Längenmesssysteme, die diese Ansprüche optimal erfüllen. Denn nur Arbeitsgeräte, die exakt auf die Bedürfnisse von Ärzten und Pflegepersonal abgestimmt sind und gleichzeitig rentabel arbeiten, bedeuten eine echte Erleichterung in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen. Die flexibel einsetzbare Säulenwaage seca 799 gehört dazu.

**Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz**

In Krankenhäusern und Arztpraxen unerlässlich: die Bewertung des Ernährungszustandes des Patienten. Deshalb ist die seca 799 mit einer BMI-Funktion versehen, über die Körpergröße und Gewicht des Patienten in eine aussagekräftige Relation gesetzt werden. Auch die HOLD-Funktion erleichtert die tägliche Arbeit: Sie sorgt dafür, dass das Ergebnis auch nach Entlastung der Waage weiter angezeigt wird. So ist es möglich, erst den Patienten zu versorgen und anschließend das Gewicht zu notieren. Zusatzgewichte, die nicht in das Wiegeergebnis einfließen sollen, werden ganz einfach über die TARA-Funktion ausgeglichen.

**Standortunabhängig und einfach zu transportieren.**

Die seca 799 kann genau dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht wird. Die Stromversorgung durch Batterien macht sie unabhängig vom Stromnetz. Aber eine flexibel nutzbare Waage muss auch bequem zu bewegen sein – deshalb ist die seca 799 mit leichtgängigen Transportrollen ausgestattet, auf denen sie ganz einfach an ihren Bestimmungsort gefahren werden kann.

**Besonders rentabel und wartungsarm.**

Die seca 799 arbeitet äußerst energiesparend und damit hoch rentabel. Der niedrige Verbrauch der wartungsarmen Säulenwaage sorgt dafür, dass sehr viele Wägungen mit einem einzigen Batteriesatz möglich sind. Auch die Abschaltautomatik unterstützt den geringen Energieverbrauch.

seca 799**Technische Daten**

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Maße (BxHxT): 294 x 831 x 417 mm
- Eigengewicht: 6,3 kg
- Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
- Funktionen: TARA, HOLD, BMI, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik
- Optional: Messstab seca 220 und seca 224, Netzgerät seca 447
- Eichklasse: 














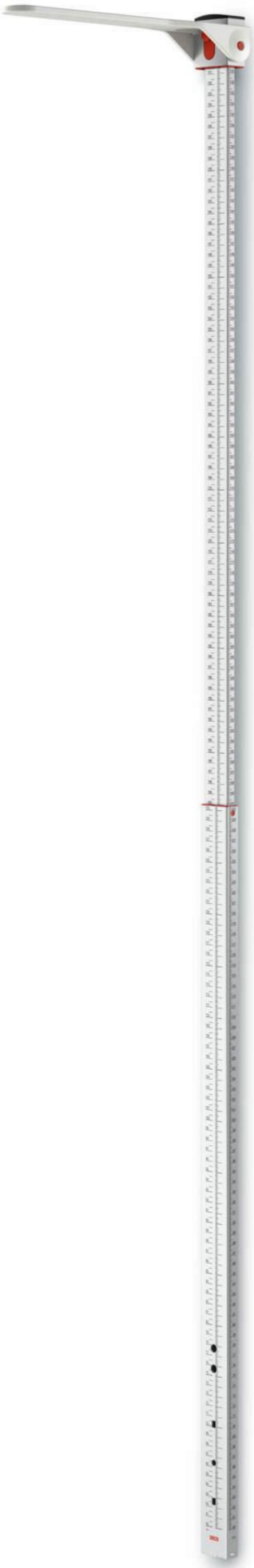







optimiert

seca 336

Elektronische Säuglings- waage



- Handlich und leicht zu transportieren.
- Flache Wiegemuße.
- Gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display.
- Optional mit digitalem Messstab seca 234 oder analogem Messstab seca 232 n.

seca 336:

Hohe Qualität und komfortable Bedienung für ein schnelles und genaues Messergebnis.

► Moderne Technologie nützt nur dann etwas, wenn sie auch den Alltagstest besteht. Die elektronische Säuglingswaage seca 336 hat die nötigen Details, mit denen der Alltag in Praxis und Krankenhaus zukünftig leichter wird: Einfach in der Bedienung, mobil und langlebig zugleich, erfüllt sie alle Voraussetzungen für die ideale Waage in der Pädiatrie.

Handlich und leicht für den mobilen medizinischen Einsatz.

Mit einem Eigengewicht von nur 3,7 kg ist diese Waage ein wahres Leichtgewicht ihrer Klasse. Der seitlich integrierte Tragegriff erleichtert den Transport. Praktisch außerdem: Die flache und damit platzsparende Form, z. B. für die Lagerung in der Schublade von Wickeltischen. In der optional erhältlichen Tasche seca 428 lässt sich die Waage unterwegs sicher verstauen.



Ob mit oder ohne Messstab, die seca 336 ist mit dem Tragegriff und geringem Gewicht gut für den Transport geeignet.

Komfortable Bedienung und gut ablesbare LCD-Anzeige.

Viel Platz zum Wohlfühlen und rundherum gut aufgehoben ist das Baby in der großen, flachen Wiegemuße. Durch die bequeme Position gelingt die Längenmessung besonders schnell und präzise. Größere Babys oder Kleinkinder können im Sitzen gewogen werden. Der ermittelte Messwert wird auf dem hell erleuchteten LCD-Display angezeigt und zwei Minuten lang festgehalten.



Gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display.

Je kürzer der Messvorgang, desto angenehmer für das Baby.

Die seca 336 ist mit einer speziellen Dämpfung ausgestattet, die auch bei unruhigen Babys sofort exakte Messergebnisse liefert. Mit dem optionalen Messstab kann im selben Arbeitsgang die Länge gemessen werden, entweder digital mit dem seca 234 oder analog mit dem seca 232 n.



Der digitale Messstab erleichtert die Messung durch ein übersichtliches Display.

Technische Daten

- Tragkraft: 20 kg
- Teilung: 5 g < 10 kg > 10 g
- Maße (BxHxT): 650 x 110 x 308 mm
- Eigengewicht: 3,7 kg
- Funktionen: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, Auto-Wägebereichumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, Bestätigen
- Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
- Eichklasse: 
- Optional: Rollwagen seca 403 und seca 402, digitaler Messstab seca 234, analoger Messstab seca 232 n, Netzgerät, Tasche seca 428



102 Max = 0.1 kg

5.3755

hold

menu

tare

power



seca

seca 403 und seca 402

Rollwagen als mobile
Aufstellfläche für seca
Säuglingswaagen



- Individuell angepasste Vertiefungen in der Oberfläche ermöglichen einen rutschfesten Stand der seca Säuglingswaagen.*
- Optimale Arbeitshöhe von 80 cm sorgt für ergonomisches Arbeiten.
- Integrierte Schublade und Einlegeboden bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Verstauen – damit Sie alles sofort verfügbar haben (seca 403).
- Optional erhältliche Papierrollenhalterung macht die Arbeit noch hygienischer (seca 402).

seca 403 und seca 402:

Die perfekte Ergänzung für seca Säuglingswaagen.

Die Rollwagen seca 403 und seca 402 sind die ideale Ergänzung für die seca Säuglingswaagen.* Sie wurden speziell für den sicheren und hygienischen Einsatz im Klinik- und Praxisalltag entwickelt. Passgenaue Vertiefungen in der Oberfläche, die der Platzierung der Waagenfüße entsprechen, sichern die Waage jederzeit gegen Verrutschen. Zusätzlich wird das sichere Wiegen durch zwei praktische Feststellbremsen ermöglicht. Und mit dem Griff am Rollwagen kann die Säuglingswaage schnell dorthin transportiert werden, wo sie gebraucht wird.



Einfach, ergonomisch und hygienisch arbeiten.

Der mobile und sichere Einsatz von Säuglingswaagen ist eine wichtige Voraussetzung in der Pädiatrie. Daher lassen sich jetzt die seca Säuglingswaagen* auf die speziell entwickelten seca Rollwagen passgenau stellen, um einen sicheren Arbeitsablauf zu unterstützen. Dabei ist die Arbeitshöhe von 80 cm für eine ergonomische Arbeitsweise optimiert. Hygienisches Arbeiten wird noch einfacher, denn die Oberfläche ist spaltlos und sehr leicht zu reinigen.

Die optionale Papierrollenvorrichtung der seca 402 macht das Arbeiten noch leichter und hygienischer.



Der seca 403 bietet praktische Ablagemöglichkeiten.

In der ausgebauten Variante besitzt der seca Rollwagen zusätzlich praktische Ablagemöglichkeiten, um Anwendermaterialien und Unterlagen stets griffbereit zu halten. Dazu gehört neben einem Einlegeboden auch eine integrierte Schublade.



Die angepassten Vertiefungen gewährleisten den sicheren Stand der seca Säuglingswaage.



Die vier Wandabweiserrollen schließen einen Kraftnebenschluss aus.

Überall sicher messen und wiegen – mit dem seca 402.

In der Basisausführung bietet der seca Rollwagen ebenfalls alle Vorteile des sicheren, mobilen und hygienischen Arbeitens mit seca Säuglingswaagen. Optional ist eine praktische und leicht montierbare Papierrollenhalterung erhältlich.

seca 403 und seca 402

Technische Daten

seca 403:

- Maße (BxHxT): 715 x 800 x 435 mm
- Gewicht: 27,5 kg
- Maximale Belastung: 45 kg
- 4 Wandabweiserrollen
- 2 Feststellbremsen
- Integrierte Schublade und Einlegeboden

seca 402:

- Maße (BxHxT): 715 x 800 x 435 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Maximale Belastung: 45 kg
- 4 Wandabweiserrollen
- 2 Feststellbremsen
- Optional: Papierrollenhalterung

* Beide Modelle bieten eine angepasste Oberfläche für folgende Waagenmodelle: seca 757, seca 717, seca 376, seca 336 und seca 384.

Überall sicher und hygienisch Messen und Wiegen – die perfekte Ergänzung der seca Säuglingswaagen.

Die seca Rollwagen seca 403 und seca 402 sind die ideale Ergänzung für die seca Säuglingswaagen. Sie wurden speziell für den sicheren und hygienischen Einsatz im Klinik- und Praxisalltag entwickelt. Passgenaue Vertiefungen in der Oberfläche, die der Platzierung der Waagenfüße entsprechen, sichern die Waage jederzeit gegen Verrutschen. Zusätzlich wird das sichere Wiegen durch zwei praktische Feststellbremsen ermöglicht. Und mit dem Griff am Rollwagen kann die Säuglingswaage schnell dorthin transportiert werden, wo sie gebraucht wird.



Die angepassten Vertiefungen gewährleisten den sicheren Stand der seca Säuglingswaage.



Die vier Wandabweiserrollen schließen einen Kraftnebenanschluss aus.



Rutschfeste und leicht zu reinigende Oberfläche für sicheres und sauberes Arbeiten.



Für sicheres Wiegen der Kleinen sorgen die Feststellbremsen.

neu

seca 403 seca 402

Rollwagen als mobile Aufstellfläche für seca Säuglingswaagen

- Sicher. Individuell angepasste Vertiefungen in der Oberfläche ermöglichen einen rutschfesten Stand der seca Säuglingswaagen seca 757, seca 717, seca 376, seca 336 und seca 384.
- Ergonomisch. Optimale Arbeitshöhe von 80 cm sorgt für ergonomisches Arbeiten.
- Praktisch. Integrierte Schublade und Einlegeboden bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Verstauen – damit Sie alles sofort verfügbar haben (seca 403).
- Hygienisch. Optional erhältliche Papierrollenhalterung (seca 408) macht die Arbeit noch hygienischer (seca 402).







DE_panda_seca_459_social_media_video.mp4

This slide was originally a mp4 file and could not be converted into PDF.
You can find the original file in the .ZIP that was downloaded.

If you're viewing this in Adobe Reader, this file can be opened automatically by clicking ***here***.





seca

Präzision für die Gesundheit


Wiegen wird
zum Kinderspiel

seca.com

Bao Bao, der kleine Panda, der Kindern das Wiegen leichter macht


In Kinderaugen kann ein Arztbesuch schnell angsteinflößend wirken. Spritzen, Mundspatel, kalte Stethoskope und unbekannte Behandlungszimmer hinterlassen eben nicht den besten Eindruck. Bao Bao, der kleine Pandabär von seca, schafft Ablenkung und lockert die Situation auf. So können Gewicht und Größe schnell bestimmt werden, während die Kinder den neuen Pandafreund entdecken.



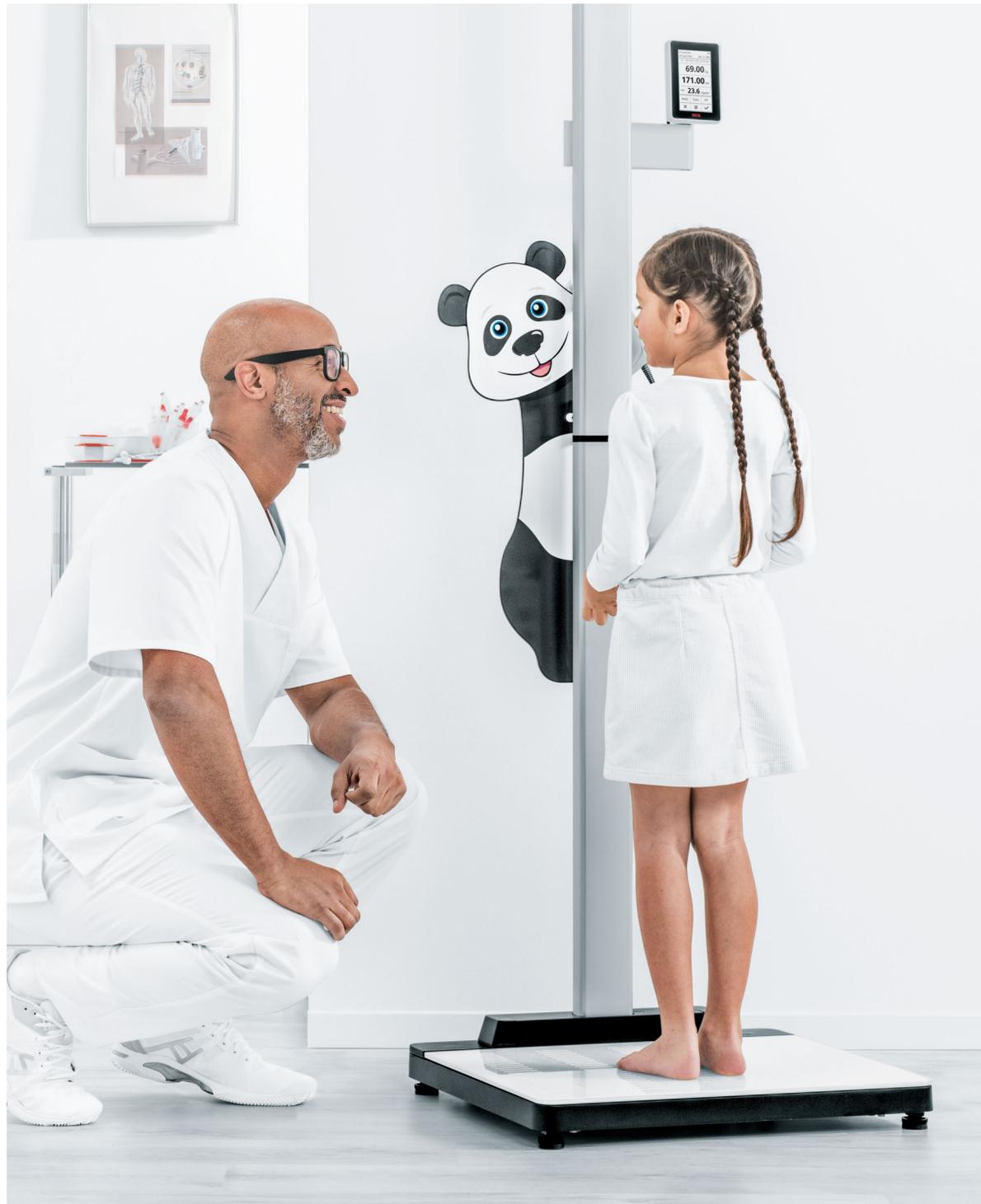


Der Pandafreund fürs Wiegen und Messen


Mit Bao Bao rüsten Sie jede compatible Messstation perfekt für das Wiegen und Messen von Kindern aus. Die Messung macht Kindern mehr Spaß und die Angst vorm Arztbesuch ist vergessen.

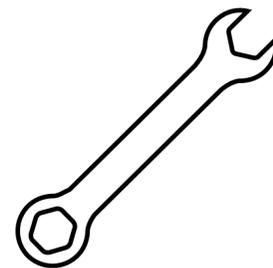

Höhenverstellbare Montage mit nur zwei Schrauben: schnell und extra-fest

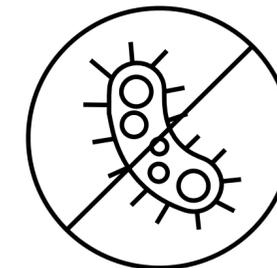

Keine Chance für Krankheitskeime dank leichter Reinigung

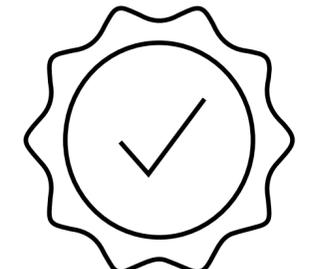

Sieht lange gut aus dank beständigem Alu-DIBOND®-Material

Machen Sie diese Waagen und Messstationen mit Bao Bao noch kinderfreundlicher

seca 704

+ Pandabär seca 459

[zum seca Shop](#)



seca Scale-up Line

+ Pandabär seca 459

[zum seca Shop](#)



seca 287

+ Pandabär seca 459

[zum seca Shop](#)



seca deutschland
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg
Deutschland

T 0800 20 00 005 Deutschland
T 00800 20 50 50 50 Österreich
F +49 40 20 00 00 50
E insidesales.de@seca.com

seca ag schweiz
Schönmattstrasse 4
4153 Reinach
Schweiz

T +41 61 711 03 00
F +41 61 711 07 04
E Info.ch@seca.com

Änderungen bleiben vorbehalten.



seca

Präzision für die Gesundheit

Wiegen wird
zum Kinderspiel

seca.com

Bao Bao, der kleine Panda, der Kindern das Wiegen leichter macht


In Kinderaugen kann ein Arztbesuch schnell angsteinflößend wirken. Spritzen, Mundspatel, kalte Stethoskope und unbekannte Behandlungszimmer hinterlassen eben nicht den besten Eindruck. Bao Bao, der kleine Pandabär von seca, schafft Ablenkung und lockert die Situation auf. So können Gewicht und Größe schnell bestimmt werden, während die Kinder den neuen Pandafreund entdecken.






Der Pandafreund fürs Wiegen und Messen


Mit Bao Bao rüsten Sie jede compatible Messstation perfekt für das Wiegen und Messen von Kindern aus. Die Messung macht Kindern mehr Spaß und die Angst vorm Arztbesuch ist vergessen.

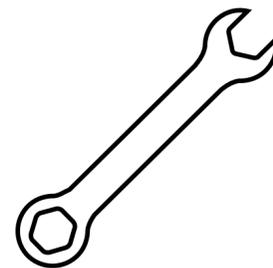

Höhenverstellbare Montage mit nur zwei Schrauben: schnell und extra-fest

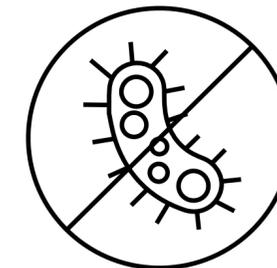

Keine Chance für Krankheitskeime dank leichter Reinigung

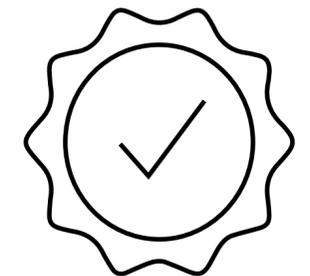

Sieht lange gut aus dank beständigem Alu-DIBOND®-Material

Machen Sie diese Waagen und Messstationen mit Bao Bao noch kinderfreundlicher

seca 704

+ Pandabär seca 459

[zum seca Shop](#)



seca Scale-up Line

+ Pandabär seca 459

[zum seca Shop](#)



seca 287

+ Pandabär seca 459

[zum seca Shop](#)



seca deutschland
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg
Deutschland

T 0800 20 00 005 Deutschland
T 00800 20 50 50 50 Österreich
F +49 40 20 00 00 50
E insidesales.de@seca.com

seca ag schweiz
Schönmattstrasse 4
4153 Reinach
Schweiz

T +41 61 711 03 00
F +41 61 711 07 04
E Info.ch@seca.com

Änderungen bleiben vorbehalten.

seca 704

Funkfähige Säulenwaage
mit bis zu 300 Kilogramm
Tragkraft 

PDMS integrated



- Netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless.
- Präzise, extrem robuste seca Wägetechnologie für bis zu 300 kg.
- TARA, Pre-TARA, BMI, HOLD, Auto-HOLD, Mutter/Kind-Funktion.
- Erweiterung zur Messstation mit optionalem Längenmessstab.

seca 704:

Das Allround-Talent mit Netzwerkfähigkeit.

Vom Kleinkind bis zum Adipositas-Patienten, die neue seca 704 ist ein echter Alleskönner. Besonders, wenn es darum geht, den BMI und die Körpergröße zu ermitteln. Hier gibt es gleich zwei Möglichkeiten: Einen mechanischen Längenmessstab zu integrieren oder die Daten eines separaten, digitalen Stadiometers per Funk zu empfangen. Und alles, was die seca 704 wiegen, messen und errechnen kann, überträgt die seca 360° wireless Funktechnologie zeitsparend an die Software seca analytics 105 auf Ihrem PC oder an die 360° wireless Drucker advanced seca 466 und 360° wireless Drucker seca 465. Wenn Sie es wollen.



300 kg Tragkraft machen alles mit.

Schwergewichtige oder adipöse Patienten haben es auf der seca 704 leicht, denn die große, flache Plattform macht das Begehen einfach und sicher. Nichts wackelt, nichts gefährdet den sicheren Stand. Dafür sorgen ein massives Untergestell aus Gusseisen sowie eine rutschsichere Auflage aus geriffeltem Gummi.



Mit der seca 360° wireless Funktechnologie kann die seca 704 auf Knopfdruck jeden Messwert an einen optionalen seca Funkdrucker oder an die seca Software auf Ihrem PC versenden.



Die BMI Funktion macht es einfach.

Besonders beim BMI ist die seca 704 eine echte Erleichterung, denn sie hilft sogar beim Ermitteln der Körpergröße. Mechanisch, mit den optionalen, voll integrierbaren Längenmessstäben seca 220 und seca 224 oder ganz komfortabel mit den digitalen 360° wireless Stadiometern seca 264 und seca 274: Die Messwerte werden an die Waage gesendet, die dann aus Gewicht und Größe den BMI errechnet.

Pre-TARA, Mutter/Kind-Funktion, HOLD und Auto-HOLD machen es kurz.

Sie wollen einen gespeicherten Wert, z.B. der Kleidung, vom Gewicht des Patienten abziehen? Kurz Pre-TARA drücken. Oder ein Kind auf dem Arm eines Elternteils wiegen? Mit der Mutter/Kind-Funktion. Jetzt schnell den Messwert speichern, um ihn erst später abzulesen? Wie gut, dass es hier die HOLD-Taste gibt. Und wenn gewünscht, kann Auto-HOLD über das Menü aktiviert werden.

- Systemfähig mit: 360° wireless Drucker advanced seca 466, 360° wireless Drucker seca 465, Software seca analytics 105 und seca emr flash 101, 360° wireless USB Adapter seca 456, Stadiometer seca 274 und seca 264

Papier- und fehlerlose Messwertübertragung per Funk.

Mit der seca 360° wireless Funktechnologie kann die seca 704 jeden Messwert an die optionalen 360° wireless Drucker senden. Mit den netzwerkfähigen Softwarelösungen seca analytics 105 oder seca emr flash 101 und dem USB Adapter seca 456 können Messwerte auch von Ihrem PC empfangen, ausgewertet und einem vorhandenen Patientendatenmanagementsystem (PDMS) zur Verfügung gestellt werden. Damit ist die seca 704 PDMS integrated und bereit für die digitale Patientenakte und alle Anforderungen, die die Zukunft an sie stellt. Nähere Erläuterungen zu PDMS integrated unter www.seca.com.

seca 704

Technische Daten

- Tragkraft: 300 kg
- Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
- Maße (BxHxT): 360 x 930 x 520 mm
- Trittfäche (BxHxT): 335 x 80 x 345 mm
- Eigengewicht: 14,9 kg
- Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional
- Datenübertragung: Funktechnologie seca 360° wireless
- Funktionen: TARA, Pre-TARA, Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT
- Optional: Messstab seca 220 und seca 224, Netzgerät seca 447
- Eichklasse:



DE_panda_seca_459_social_media_video.mp4

This slide was originally a mp4 file and could not be converted into PDF.
You can find the original file in the .ZIP that was downloaded.

If you're viewing this in Adobe Reader, this file can be opened automatically by clicking ***here***.

